



Termómetro infrarrojo

Descripción

Termómetro clínico de alta precisión para controlar la temperatura elevada de una persona o de objetos, según el modo seleccionado.

Características

- Permite tomar la temperatura humana y de objetos.
- Permite mostrar resultados en Celsius y Fahrenheit.
- El rango de medición corporal humana detecta entre 32°C y 42,9°C.
- El rango de medición de objetos detecta entre 0°C y 100°C.

Producto	Código SAP
Termómetro infrarr.	143610

Para cotizar pilas, los datos son:

Producto	Código SAP
Pila Energizer AAA Pack 2 un. E92BP2	133956



Medición de superficie




Tecnología infrarroja



Pantalla grande

- Posee una emisividad fija de 0,95.
- Almacena los últimos 30 registros.
- Fuente de alimentación: 2 pilas AAA (No incluidas).

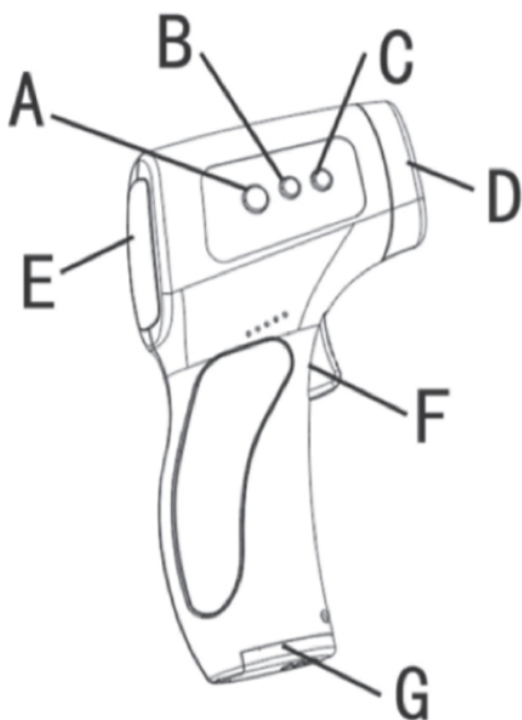

Descripción del Medidor

- A. Set Up.
- B. +
- C. -
- D. Lector
- E. Pantalla
- F. ON / Scan
- G. Tapa de Batería

Instrucciones para tomar temperatura corporal

1. Encender termómetro presionando el botón SCAN.
2. En la pantalla debe aparecer la palabra “Body”, indicando que se encuentra en temperatura modo Persona, y luego se pone el lector a 3–5 cm de la frente, y presionar el botón SCAN hasta que el equipo emita un pitido, y se despliegue la temperatura en la pantalla.
 - 2.1. El Equipo viene predeterminado para tomar la temperatura en Modo Persona.
3. Para apagar el equipo, presionar 5 segundos el botón SCAN, o esperar 60 segundos sin utilizar.

Instrucciones para tomar temperatura en objetos

1. Presionar el botón “Set Up” dos veces, hasta que en la pantalla aparezca “Surface temp”
2. Poner el lector del termómetro frente al centro del objeto, a una distancia de 3-5 cm, y presionar el botón SCAN hasta que suene un pitido, y se despliegue la temperatura en la pantalla.

Cambiar la Unidad de Medida

1. Mantener presionado el botón “Set Up” hasta que suene, y en la pantalla aparezca el mensaje “F1”
2. Presione el botón “+” para alternar entre °C y °F.

Revisar las últimas mediciones

1. Con el equipo encendido, presionar el botón “+” para ir revisando las últimas mediciones desde la más nueva a la más antigua.

Recomendaciones

1. Utilizar en habitaciones de 16 – 35 °C, permitiendo que el equipo se aclimate por lo menos 30 minutos antes de la medición.
2. La persona o el objeto al que se le tomará la temperatura, debe permanecer a lo menos 20 minutos en la misma habitación que el termómetro, para evitar errores debido a la temperatura superficial.
3. Si el equipo ha sido sometido a muchas mediciones, se debe dejar reposar a lo menos 30 minutos antes de continuar con las mediciones.